

Chambre de retenue antistatique

AeroChamber^{MD} mini

La chambre de retenue antistatique **AeroChamber^{MD} mini** est conçue pour administrer des médicaments par aérosol-doseur dans des circuits de ventilation artificielle ou avec un ballon de réanimation manuelle. Compacte, la chambre réduit au minimum l'espace mort.

Consulter le [mode d'emploi](#) pour en savoir plus.

Connecteur au tube
endotrachéal de 15 mm

Porte-cartouche avec adaptateur
Permet l'utilisation de la chambre avec la plupart des
types d'aérosols-doseurs, y compris ceux ayant un
compteur de doses intégré



Canal d'expiration avec valves
Réduit au minimum l'espace mort pour les
patients ayant un volume respiratoire faible

Format ergonomique
La prise striée facilite l'utilisation par les
soignants lors de l'activation de l'aérosol-doseur

- Chambre de petit volume (110 mL) convenant aux nouveau-nés et aux autres patients ayant un volume respiratoire plus faible¹
- La caractéristique antistatique améliore la fiabilité de l'administration du médicament²

- Chambre prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage : aucun prétraitement n'est requis, ce qui permet d'économiser du temps

Numéro de pièce

Quantité par caisse

875110010

10

USAGE MULTIPLE POUR UN PATIENT UNIQUE | Remplacer en même temps que le circuit de ventilation.

Ne pas nettoyer ni désinfecter.

EMBALLAGE : Emballage tubulaire, avec mode d'emploi inclus.


Non fabriquée à partir de bisphénol A (BPA), de phtalates, de latex ou de plomb.

1. Nagel M, et al. *European Respiratory Journal* 2009;34(S53):P2036.


2. Suggett J, et al. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery* 2015;28(4):A-1-A-25.

Conception assurant
un débit dynamique

Phase d'inhalation –
La valve d'inhalation s'ouvre

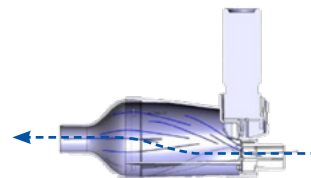

Phase d'expiration –
La valve d'expiration s'ouvre

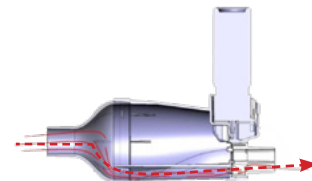

Utilisation avec un ballon
de réanimation



AeroChamber^{MD}
mini

Chambre de Retenue Antistatique

Fabriqué par :

+1-866-510-0004
info@trudellmed.com

trudellmed.com



Conçue et mise
au point au Canada
Fabriquée au Canada
avec des pièces canadiennes
et américaines.

Distribution dans les
hôpitaux canadiens :
Trudell Solutions Santé
customerservice@trudellhs.com
www.trudellhs.com/fr

