

« Parfois, ce sont les petites choses qui font la grande différence. »

#### KLS Martin Group

**KLS Martin Australia Pty Limited**  
Sydney · Australie  
Tél.: +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

**KLS Martin do Brasil Ltda.**  
São Paulo · Brésil  
Tél.: +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

**KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.**  
Shanghai · Chine  
Tél. +86 21 5820 6251  
china@klsmartin.com

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
Dubai · Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

**KLS Martin LP**  
Jacksonville · Florida, États-Unis  
Tél. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

**KLS Martin India Pvt Ltd.**  
Chennai · Inde  
Tél. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

**Martin Italia S.r.l.**  
Milan · Italie  
Tél. +39 039 605 67 31  
italia@klsmartin.com

**Nippon Martin K.K.**  
Tokyo · Japon  
Tél. +81 3 3814 1431  
nippon@klsmartin.com

**KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**  
Penang · Malaisie  
Tél.: +604 505 7838  
malaysia@klsmartin.com

**KLS Martin de México S.A. de C.V.**  
Mexico · Mexique  
mexico@klsmartin.com

**Martin Nederland/Marned B.V.**  
Huizen · Pays-Bas  
Tél. +31 35 523 45 38  
nederland@klsmartin.com

**KLS Martin UK Ltd.**  
Reading · Royaume-Uni  
Tél. +44 1189 000 570  
uk@klsmartin.com

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
Moscou · Russie  
Tél. +7 499 792-76-19  
russia@klsmartin.com

**KLS Martin Taiwan Ltd.**  
Taipei 106 · Taiwan  
Tel. +886 2 2325 3169  
taiwan@klsmartin.com

**KLS martin**  
GROUP




#### Vous avez besoin d'informations complémentaires ?

Veillez vous adresser à votre revendeur local ou à KLS Martin pour obtenir d'autres supports d'information sur les produits.



**marLED® E3**

Petit luminaire – grand effet !

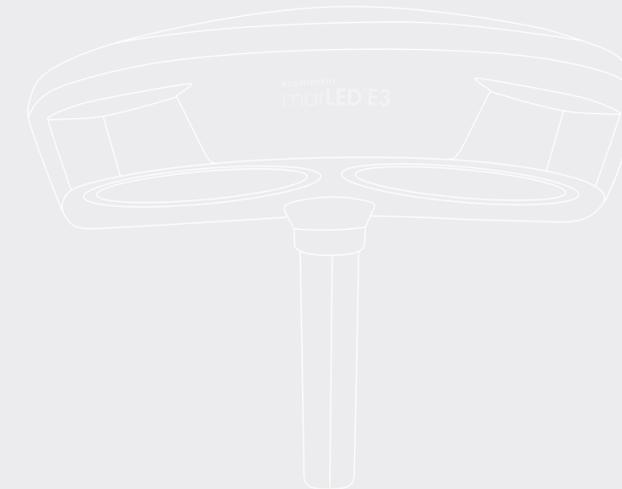

#### Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Une société de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Allemagne  
Boîte postale 60 · 78501 Tuttlingen · Allemagne  
Tél. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com




90-991-04-10 · Rev. 01 · 2020-10 · Printed in Germany · Copyright by Gebrüder Martin GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten · Technische Änderungen vorbehalten  
We reserve the right to make alterations · Cambios técnicos reservados · Sous réserve de modifications techniques · Ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche

www.klsmartin.com



Faisceau lumineux efficace –  
grâce à une technologie  
à lentilles ultra-moderne

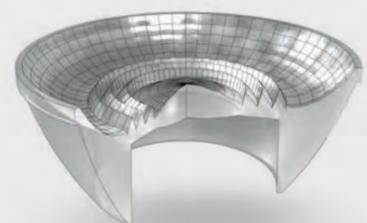

**marLED® E3 avec marLED® E9i –  
un imbattable duo**

Combinez le petit luminaire marLED® E3 au luminaire marLED® E9i. Vous bénéficiez ainsi d'un duo raffiné alliant les avantages d'un grand luminaire d'éclairage opératoire à la flexibilité d'un petit modèle et satisfaites ainsi les exigences de presque toutes les spécialités.

Montage variable –  
toujours adapté à vos  
exigences d'espace

## marLED® E3

Petit luminaire – grand effet !

Nous nous sommes donnés pour objectif d'équiper chaque bloc opératoire de la technologie LED ultra-moderne. Le luminaire marLED E3 nous le permet. Notre petit luminaire d'éclairage opératoire affichant une intensité d'éclairage de 100 000 lux convainc par son excellent éclairage associé à un design compact et convient particulièrement bien aux petites interventions. Vous profitez ici de la technologie LED la plus raffinée qui est non seulement visuellement agréable mais aussi très intéressante d'un point de vue économique.



### marLED® E3 – positionnement et commande sûrs

Le luminaire marLED® E3 peut être facilement manœuvré et exactement positionné. La suspension à cardan tout en souplesse offre une mobilité optimale. Le clavier intuitif positionné sur le corps du luminaire permet à l'utilisateur de régler l'intensité lumineuse en fonction de ses propres besoins.



### marLED® E3 – une lumière brillante

Utilisant une technologie LED ultra-moderne, le luminaire marLED® E3 garantit de très hautes performances d'éclairage. Il fait partie des meilleurs de sa classe de par son rendu optimal, sa durée de vie exceptionnellement longue et son faisceau lumineux d'un nouveau genre généré par des lentilles spécifiques.



### marLED® E3 – pour un maximum d'hygiène

Le design effilé et clos du luminaire marLED® E3 permet un nettoyage rapide et aisé. Il satisfait même les exigences d'hygiène les plus strictes. Le verre de protection sans bord avec joint intégré prévient tout effet capillaire en cas d'utilisation de détergents.



### Qu'est-ce qui convainc nos clients ?

- ✓ Très hautes performances d'éclairage, haute efficacité énergétique
- ✓ Température de couleur similaire à la couleur du jour
- ✓ Durée de vie des LED remarquable
- ✓ Champ lumineux régulier et homogène
- ✓ Aucun rayonnement de chaleur dans le faisceau lumineux
- ✓ Disponible sous forme de luminaire de plafond, mural ou mobile

### Caractéristiques techniques

	marLED® E3
Puissance absorbée à 220-240 VCA	39 VA
Puissance absorbée à 100-130 VCA	32 VA
Durée de vie moyenne de la lampe attendue	> 60 000 h
Diamètre du champ lumineux (d10, à une distance de 1 m)	170 mm
Éclairage central (à 1 m)	100 000 lx
Température de couleur	4300 K
Éclairage central réglable de manière électrique de/à	30-100 %
Indice de rendu des couleurs [Ra (1-8)] /R9	99